


TRAUFIX
SPORTS MEDICINE



LIFE WITHOUT LIMITS

CE
1639

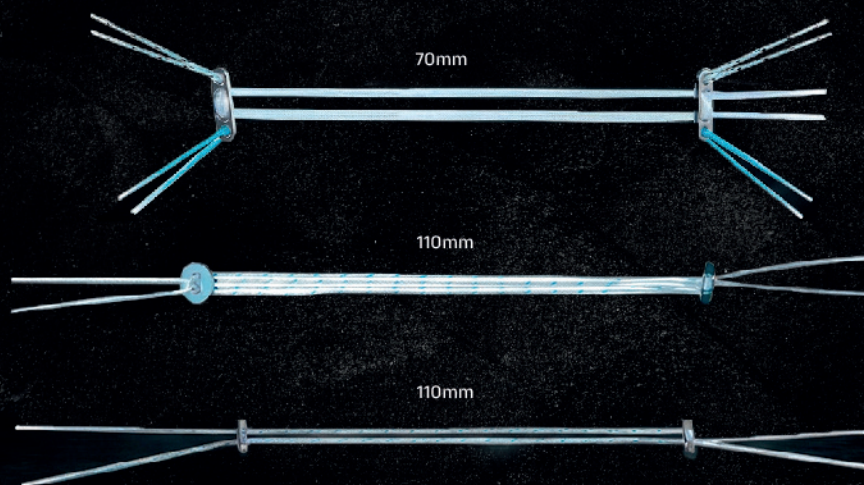

SISTEMA DOBLE BOTÓN



Descripción


PEQUEÑAS ARTICULACIONES
(HALLUX VALGUS, MUÑECA)

Código

STRAUFIX-DB-1110

Medidas

110mm

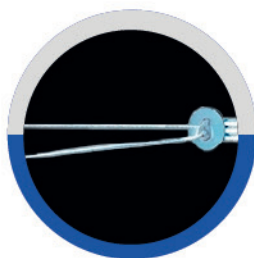

Descripción

HOMBRO
(ACROMIO CLAVICULAR)

Código

STRAUFIX-DB-2110

Medidas

110mm



Descripción

PEQUEÑAS ARTICULACIONES
(SYNDESMOSIS TOBILLO)

Código

STRAUFIX-DB-3070

Medidas

70mm

INDICACIONES

El sistema de tratamiento para las deformidades del **Hallux Valgus** proporciona la reducción del ángulo Inter metatarsiano mientras evita las complicaciones asociadas con las osteotomías.

La articulación **acromio clavicular** se puede tratar eficazmente utilizando un sistema de doble botón de forma oblonga tanto para la clavícula como la coracoides, es una técnica mínimamente invasiva que permite un rápido retorno a la actividad física o cotidiana.

El sistema de botón **KNITROPE syndesmosis** ocupa dos botones y una sutura UHMWPE para estabilizar la syndesmosis eliminando la necesidad de realizar nudos permitiendo una reducción anatómica.


CARACTERÍSTICAS




SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL AJUSTABLE



USO Y DISEÑO SEGUROS

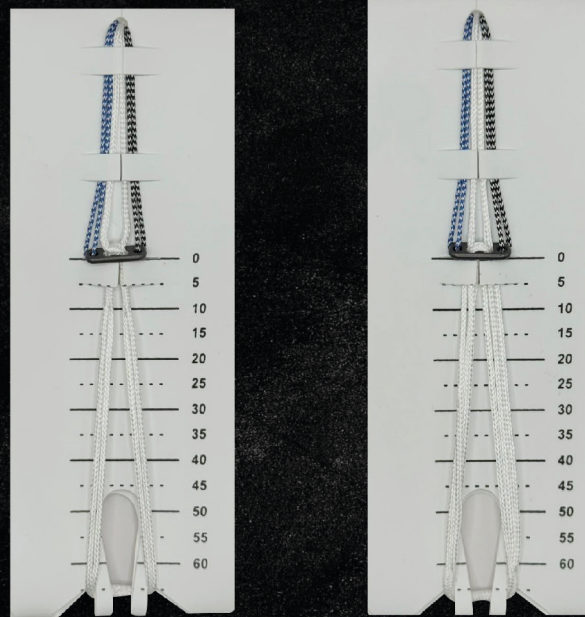

SISTEMA AJUSTABLE - LADO SUPERIOR

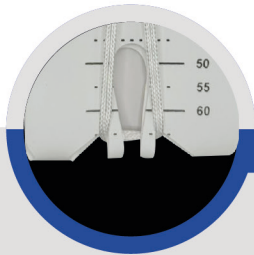


Descripción

SISTEMA DE FIJACIÓN KINTROPE

Código
STRAUFIX-BT-1070

Medida
70mm

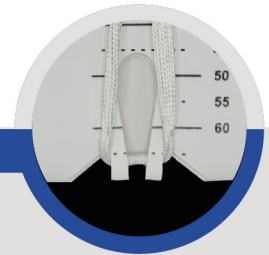

Descripción

SISTEMA DE FIJACIÓN KINTROPE PLUS

Código
STRAUFIX-BT-1071

Medida
70mm

INDICACIONES

ACL KNITROPE es un sistema de fijación cortical ajustable proporcionando un sistema fuerte y ríjido.



Es la última evolución en fijación cortical. Conocido por el bajo desplazamiento, ***1-3mm** la fijación ultra fuerte.

ACL KNITROPE PLUS Superficie de sutura más amplia en el bucle, proporciona mayor área de contacto ayudando a proteger el injerto y evitando posibles desplazamientos y la fricción entre el dispositivo e injerto

CARACTERÍSTICAS

✓ SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL AJUSTABLE

✓ USO Y DISEÑO SEGUROS

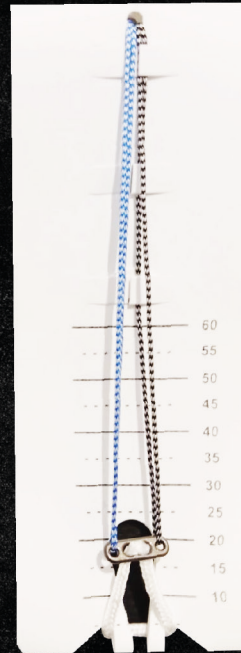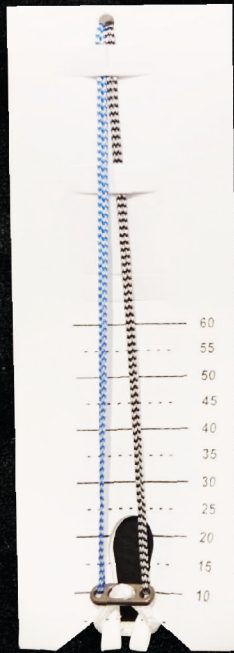

SISTEMA DE FIJACIÓN KNITBUTTON

Descripción

SISTEMA DE FIJACIÓN KNITBUTTON

Código

STRAUFIX-BT-0015

Medida

15mm



Descripción


SISTEMA DE FIJACIÓN KNITBUTTON

Código

STRAUFIX-BT-0025

Medida

25mm

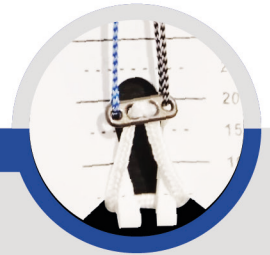


INDICACIONES

- Indicado en la cirugía de reparación ACL/PCL para fijar el tejido blando al hueso.
- Los sistemas KnitButton usan una asa continua de UHMWPE.
- La fuerza de tensión es de alrededor de 1850 Newtons.
- La placa está hecha de Titanio Ti-6Al4V-5Eli.
- Los sistemas KnitButton tienen suturas USP #5 UHMWPE de cuerda jalable de dos diferentes colores.
- Se recomienda el uso de broca canulada femoral de 5 mm..

CARACTERÍSTICAS

- ✓ SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL NO AJUSTABLE
- ✓ UNA SOLA MEDIDA PARA CADA BOTON
- ✓ FÁCIL MANIPULACIÓN
- ✓ USO SEGURO

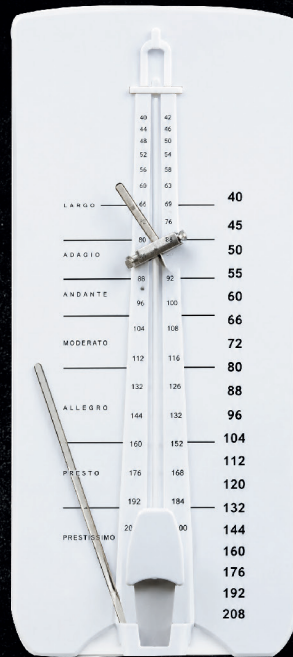

SISTEMA DE FIJACIÓN KNITROPE-H.T.H

DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE FIJACIÓN KNITROPE-H.T.H

CÓDIGO

STRAUFIX-BTB-0002




INDICACIONES

El implante KNITROPE BTB está diseñado para su uso con injertos de ligamento cruzado anterior (LCA) osteotendinosos y cuenta con un sistema de bloqueo ajustable de cuatro puntos. Permite la colocación del injerto a través de un pequeño orificio perforado en el bloque de hueso cortical, lo que facilita una fijación simplificada del injerto BTB.

CARACTERÍSTICAS

✓ SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL AJUSTABLE

✓ USO Y DISEÑO SEGUROS

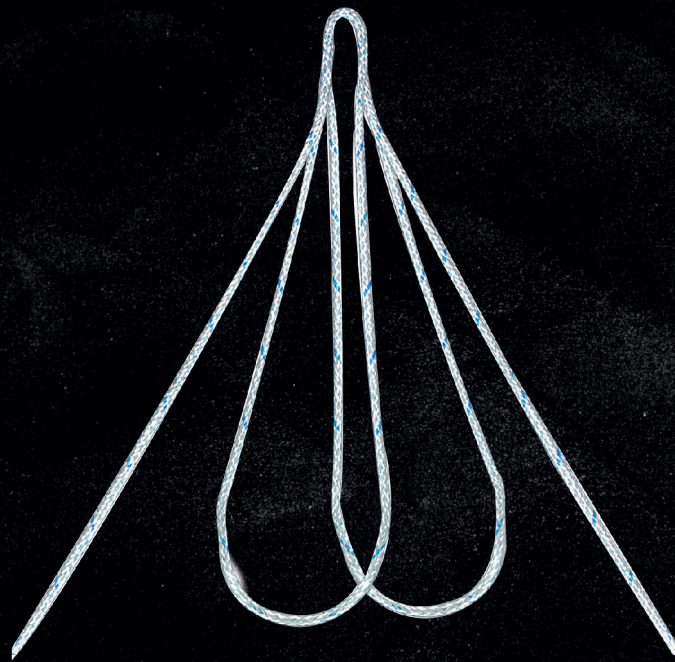


SISTEMA DE FIJACIÓN KNITROPE- LOOP

DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE FIJACIÓN KNITROPE- LOOP

CÓDIGO

STRAUFIX-LP-0001

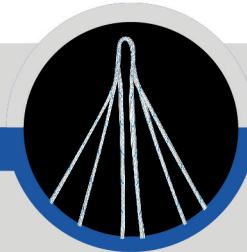

INDICACIONES

El botón acoplable ha revolucionado los injertos de fijación de asa ajustable y mínimamente invasivos utilizados en la cirugía de ligamentos de rodilla. Adecuados para todos los tipos de injertos, sistema KNITROPELOOP permite al cirujano colocar botones redondos independientes.

CARACTERÍSTICAS



SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL AJUSTABLE



USO Y DISEÑO SEGUROS



BOTÓN DE EXTENSION



Descripción

BOTON DE EXTENSION

Código

STRAUFIX-JP-0002

INDICACIONES

Puede cargarse y fijarse a un KnitButton de diámetro **Ø5x20mm** para la fijación cortical.

Está diseñado para cirugías de revisión.

La placa está fabricada en titanio **Ti-6Al-4V 5ElI**.

En casos de complicaciones por expansiones corticales, este botón se acopla a cualquiera de los botones para aumentar el tamaño del botón normal.

CARACTERÍSTICAS



SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL NO AJUSTABLE



USO Y DISEÑO SEGURO



BOTÓN KNITROPE®

DESCRIPCIÓN

BOTÓN KNITROPE

CÓDIGO

STRAUFIX-YD-0001



DESCRIPCIÓN

BOTÓN KNITROPE - GRANDE

CÓDIGO

STRAUFIX-YD-0002



CARACTERÍSTICAS



SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL NO AJUSTABLE



USO Y DISEÑO SEGUROS



SPORTS MEDICINE

VENTAS@DIPROMEDIC.COM
(55) 9000 4888/89/90/91

DIPROMEDIC

GERENCIA.NACIONALCX@DIPROMEDIC.COM
+52 1 55 5407 4098



DIPROMEDIC.COM

