

FIBULE

PLACA ALP FIBULE PARA PERONÉ DISTAL



PERFECTO ADOSAMIENTO AL HUESO




TIDIS II

PLACA ALP PARA TIBIA DISTAL TIDIS II

TRAUFIX
READY TO RUN

PLACA ALP PARA TIBIA DISTAL TIDIS II

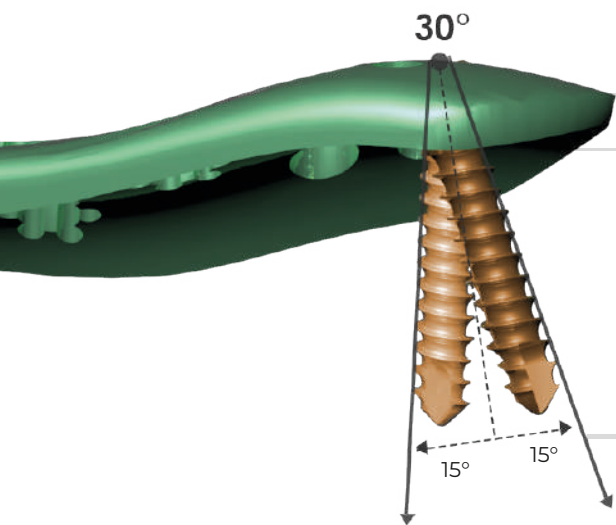

REBORDES REDONDEADOS
PARA MINIMIZAR LA IRRITACIÓN DE LAS PARTES BLANDAS


BAJO PERFIL EN LA PARTE DISTAL **1.6mm**



SIETE ORIFICIOS POLIAXIALES ($\pm 15^\circ$) Y DOS MONOAXIALES
PARA EVITAR DAÑO ARTICULAR AL PERONÉ

ORIFICIO DISTAL HACIA EL MALÉOLO TIBIAL CON 30° GRADOS
DE INCLINACIÓN + 15° GRADOS DE POLIAXIALIDAD

LOW CONTACT SUPERFICIAL
LAS MUESCAS EN LA PARTE SUPERIOR
PERMITEN LA CIRCULACIÓN
DE LOS VASOS SANGUÍNEOS

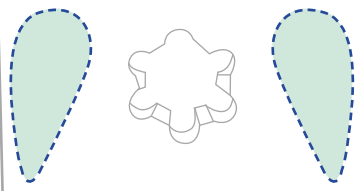

Distal Tibia Plate Tidis II

Versión Izq. (Cód. 165) / Der. (Cód. 164)

Placas 5, 7, 9, 11 and 13 orificios

3.5mm TORNILLO DE CORTICAL ALP TITANIO (Cód. 106, Longitud 12mm-60mm)
3.5mm TORNILLO DE ESPONJOSO ALP TITANIO (Cód. 107, Longitud 12mm-60mm)
3.5mm TORNILLO DE CORTICAL TITANIO (Cód. 112, Longitud 12mm-60mm)

PLACA ALP FIBULE PARA PERONÉ DISTAL



CINCO ORIFICIOS POLIAXIALES DISTALES
PARA TORNILLOS 2.5mm Y 2.7mm

ORIFICIOS COMBINADOS

REBORDES REDONDEADOS
PARA MINIMIZAR LA IRRITACIÓN DE LAS PARTES BLANDAS

ESTRUCTURA ANATÓMICA


Distal Fibula Plate Fibule

Versión Izq.(Cód. 234) / Der. (Cód. 233)

Placas 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 orificios

2.5mm TORNILLO DE CORTICAL ALP TITANIO (Cód. 155, Longitud 08mm-30mm)
2.7mm TORNILLO DE CORTICAL ALP TITANIO (Cód. 170, Longitud 06mm-60mm)
3.5mm TORNILLO DE CORTICAL ALP TITANIO (Cód. 106, Longitud 12mm-60mm)
3.5mm TORNILLO DE CORTICAL TITANIO (Cód. 112, Longitud 12mm-60mm)


El diseño de las placas es anatómico
y de bajo perfil.

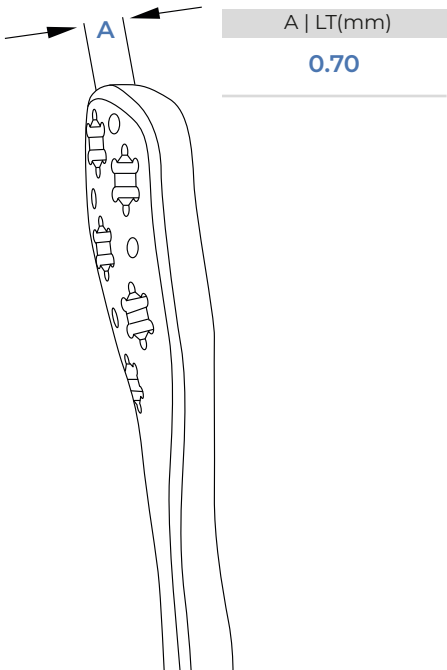


PLACA ALP PARA TIBIA DISTAL TIDIS II

Tabla de longitud

PLACA	TIDIS II
ORIFICIOS	LT (mm)
5 Orif.	121.00
7 Orif.	147.00
9 Orif.	173.00
11 Orif.	199.00
13 Orif.	225.00

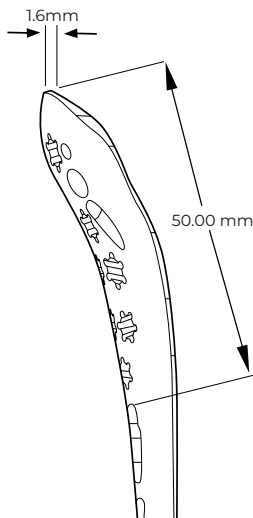

Especificaciones

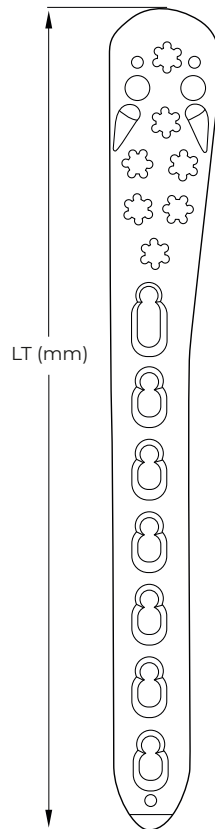


PLACA ALP FIBULE PARA PERONÉ DISTAL

Tabla de longitud

PLACA	FIBULE
ORIFICIOS	LT (mm)
3 Orif.	73.00
4 Orif.	86.00
5 Orif.	99.00
6 Orif.	114.00
7 Orif.	127.00
9 Orif.	153.00
11 Orif.	179.00

Especificaciones

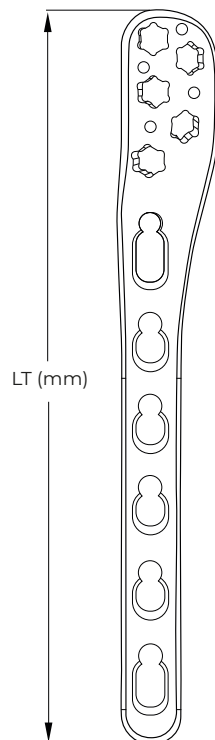

Aleación de Titanio 6Al4V ELI ASTM F136

Especial para implantes quirúrgicos

Design by **TRAUFIX**
READY TO RUN



HECHO EN MÉXICO



*Refer to 510(k) for cleared devices. Some pictures of devices in this banner are not 510k cleared.



510 (k) K201510
*Consultar productos

SISTEMA MODULAR ALP | ALL IN ONE KIT

INSTRUMENTAL Y PLACAS EN UN KIT | FÁCIL & CÓMODO

EQUIPO ALP PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS


CANT. EQUIPO

- 1 Guía broca neutra excéntrica Ø 2.5mm
- 2 Guía broca doble Ø2.5 / 3.5mm
- 1 Punta de desarmador en hexágono con anclaje AO Ø2.5mm
- 1 Punta de extractor de tornillo (con punta en cono) Ø2.5mm
- 1 Punta de avellanador Ø6mm
- 1 Punta de escariador (sacabocados) para pequeños fragmentos Ø6.5mm
- 1 Mango en T con anclaje rápido (AO)
- 1 Punta de machuelo Ø3.5mm
- 1 Mango con torquímetro anclaje AO Ø1.5 NM
- 1 Medidor de profundidad acero inoxidable Ø60mm
- 2 Alambre guía punta roscada Ø1.1mm
- 2 Alambre Kirschner Ø1.6mm
- 1 Desarmador con punta en hexágono para tornillo de 3.5/4.0 con sujetador de tornillo Ø2.5mm
- 1 Broca con anclaje AO Ø2.5 x 150mm
- 1 Broca con anclaje AO Ø2.7 x 150mm
- 1 Broca con anclaje AO Ø3.5 x 150mm
- 2 Guía de broca / camisa Ø2.7mm

EQUIPO DE APOYO PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

CANT. EQUIPO

- 2 Separadores hohmann (par) 8/22
- 2 Mini lane
- 2 Pinza multidentada
- 2 Pinza tipo campo 13.5mm
- 1 Cortadora p/clavillo kirschner
- 1 Cucharilla volkman 17cm
- 1 Pinza gubia 20cm
- 1 Triscadores para pequeños fragmentos
- 1 Osteotomo mini lambotte 8mm
- 1 Osteotomo mini lambotte 12mm
- 1 Elevador de periostio 9mm
- 2 Pinza verbrugge 17.5cm
- 1 Martillo 200 G
- 1 Pinza tipo campo 20cm
- 1 Pinza multidentada 16cm
- 1 Pinza punta tope 120mm
- 2 Punta de desarmador con anclaje AO T8 Ø2.5mm
- 1 Mango con torque AO verde 0.8 NM
- 1 Osteotomo mini-lambotte Ø3 x 125mm
- 1 Osteotomo mini-lambotte Ø4 x 125mm
- 1 Osteotomo mini-lambotte Ø6 x 125mm
- 1 Osteotomo mini-lambotte Ø8 x 125mm
- 1 Mango tipo relojero con entrada AO azul Ø2.5mm
- 2 Guía de broca (Camisa) 2.0 / 2.5mm
- 2 Broca con anclaje rápido 2.0 x 125mm
- 1 Medidor lionter 50mm
- 1 Guía de broca doble 2.0/2.7mm
- 1 Pinza de adson brown
- 2 Separador mini-hohmann 6mm
- 2 Alambre Kirschner 1.1 X 100mm

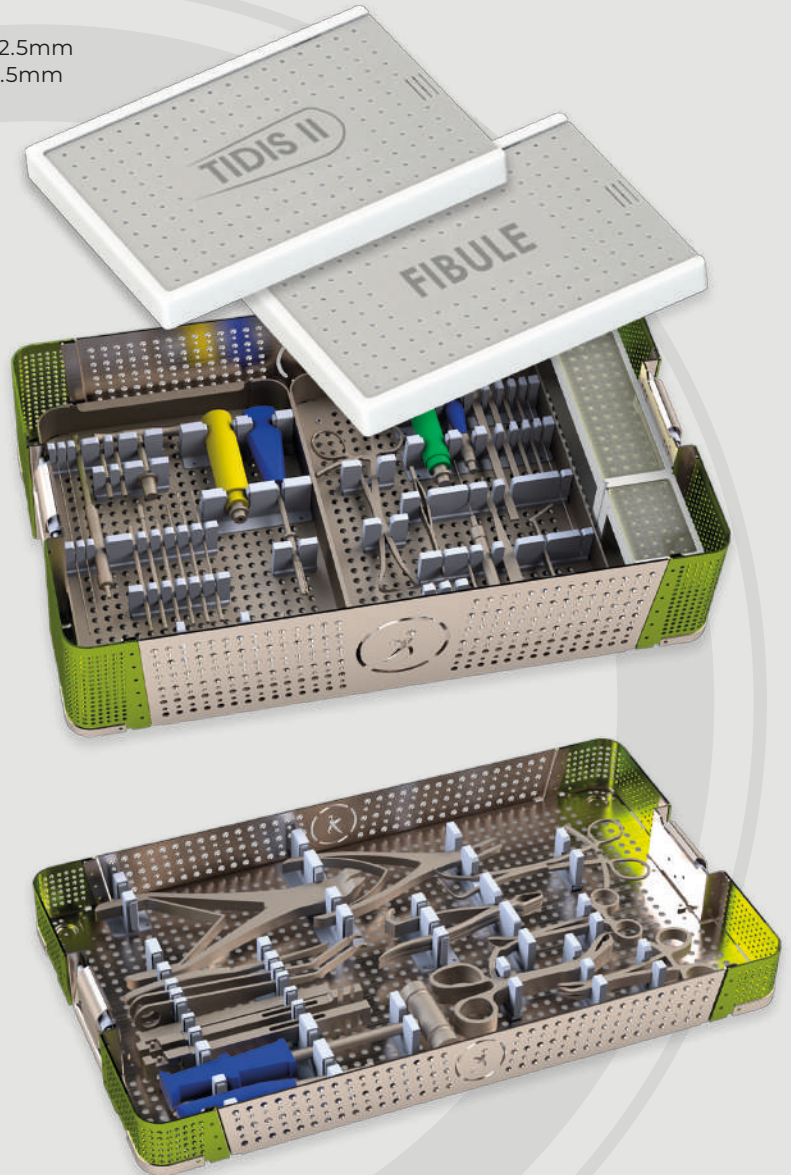

internationalsales@fixier.com.mx
Celular: (+52) 55 8106 3240

www.traufix.com

 traufix.mx

 traufix